

**BORIK**

НАБОР ДЛЯ RT-ЛИФТИНГА КОЖИ ЛИЦА

#### ЛОСЬОН CLEANING LOTION

Мягкий очищающий лосьон, идеален для подготовки введения активных веществ с помощью аппаратных процедур.

#### КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ RF (RT)-LIFTING

Специально разработан для эффективной и комфортной процедуры RT-лифтинга (радиочастотного лифтинга, радиолифтинга). Гель имеет повышенную плотность и дает отличный контакт для металлических излучателей манипулы, а сбалансированный состав усиливает подтягивающее действие радиочастотной процедуры.

#### КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ LIFTING ULTRA

Содержит сбалансированный комплекс активных компонентов, способствует быстрому восстановлению и обновлению собственного эластинового и коллагенового каркаса кожи. Пролонгирует действие RT-лифтинга и других методов, формирующих контур лица.

#### ГЕЛЬ-МАСКА REVITAL EXPRESS

Обладает восстанавливающим, заживляющим, успокаивающим, противовоспалительным действием, глубоко увлажняет и ревитализирует кожу после аппаратных тепловых процедур, инсоляции, пилингов.

## ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

- Коррекция овала лица.
- Коррекция носогубных складок.
- Выравнивание рельефа лица.
- Коррекция периоральных морщин.
- Коррекция линий «марионетки».
- Устранение мешков под глазами.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Для комбинирования с другими косметологическими процедурами обязательна консультация специалиста.

После процедуры рекомендуется воздержаться от принятия сауны, солярия и избегать физических нагрузок не менее трех дней.

## РАСХОД ПРИМЕНЯЕМОГО СРЕДСТВА НА ПРОЦЕДУРУ

Лосьон CLEANING LOTION	2–4 мл
Контактный гель RF (RT)-LIFTING	2–4 мл
Контактный гель LIFTING ULTRA	2 мл
Гель-маска REVITAL EXPRESS	2–3 мл

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистите кожу лосьоном CLEANING LOTION после демакияжа.
- Снимите металлические аксессуары, например серьги, ожерелья, браслеты и т.д., а также контактные линзы.
- Нанесите контактный гель RF (RT)-LIFTING локально на прорабатываемую зону. Используйте достаточное количество геля и равномерно распределите его по лицу.
- Включите прибор, нажав на кнопку включения.
- Выберите уровень воздействия в соответствии с состоянием кожи.

Уровень 1 — низкий уровень.

Уровень 2 — умеренный уровень.

Уровень 3 — высокий уровень.

Для первого использования или в случае дискомфорта рекомендуется уровень 1.

- Медленно перемещайте рабочую насадку прибора с контактными точками радиочастотного воздействия по коже.

Перемещайте блок медленно (1 секунда для каждого движения).

Лицо, шея и область вокруг глаз разделены на 10 участков. Прибор будет вибрировать по завершении времени, отведенного на работу с одной зоной, напоминая о переходе к следующему участку.

Во время использования следите за тем, чтобы все контактные точки радиочастотного воздействия касались кожи.

Не используйте прибор на висках, надыке, области вокруг ушей, глазном яблоке и верхнем веке.

Не используйте прибор на сухой коже.  
Гель требуется для всех процедур.


- После завершения процедуры RT-лифтинга удалите влажными салфетками остатки геля.

- Нанесите активный контактный гель LIFTING ULTRA по массажным линиям до впитывания.
- Нанесите гель-маску REVITAL EXPRESS на 15–20 минут.

Для усиленного эффекта рекомендуется создать эффект окклюзии с помощью пищевой пленки.

Курс рассчитан на 6–10 процедур с периодичностью 1 раз в неделю.

Используйте прибор в соответствии с указаниями на иллюстрациях.

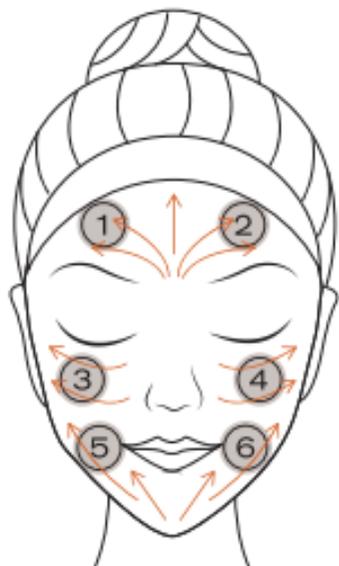

2 минуты для каждого участка  
(всего 12 минут)



2 минуты для каждого участка  
(всего 4 минуты)



2 минуты для каждого участка  
(всего 4 минуты)

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

